

携帯心電計 操作ガイド

○本製品は防水仕様ではございません。

○お手入れの仕方

- ・乾いた布で汚れを拭き取ります
- ・汚れが落ちにくい場合、水もしくは薄めた中性洗剤で湿らせたガーゼや綿棒などで拭き取ってください。
- ・アルコール・シンナー・ベンジンなどの薬品で拭かないで下さい。


本体の3つの電極を使ってはかります。



1 本体の電源ボタンを長押しして、電源を入れます。


2 1)メニュー画面で
[心電図の測定]
を選択し、決定を押してください。

2)[本体電極]を選択し、決定
3)[手のひら]または[胸部]を選択し、決定

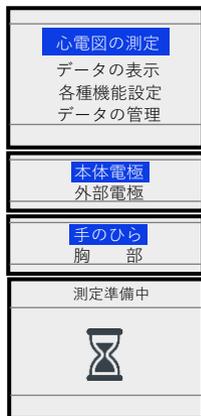

3 砂時計の絵が出たら
約6秒間後に
測定が始まるので、測定の
体勢をとります。

4 図のように右手で本体上下の電極を持つように軽く握ります。

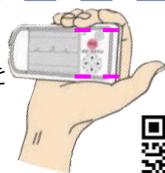

5 測定を開始します。

測定方法は3つです。

【左胸にあてる】 【左手にあてる】 【左足首にあてる】



手のひら
測定動画



※測定中の画面

6 測定が終了すると、「心電図波形」→「R-Rグラフ」が表示されます。決定を押していくと再度心電図の測定に戻ります。測定を終了する場合は、電源ボタンを長押しして電源を切ってください。



上手に心電図が取れないときのヒント

- ・身体力を抜いて、イスなどにゆったり座って測定してください。
- ・測定中は体を動かさないようにしてください。
- ・本体を強く握っていませんか？ 軽く握りましょう。
- ・手や肌が乾燥している時は、お湯を含ませたタオル等で拭いてから測定してください。

【注意事項】

- ・貸出心電計の破損・紛失については患者様の実費負担となりますのでお取り扱いについてはご注意ください。

【貸出期間】

- ・2022年 月 日 ~ 2022年 月 日
⇒ 2022年 月 日に返信用キッドでご返送ください。